

SONDES ÉLECTRONIQUES MHR

UNE MÉTHODE RAPIDE ET FIABLE
POUR VOS EXAMENS DE MANOMÉTRIE



CHOIX
SIMPLICITÉ D'EMPLOI
FIABILITÉ

SONDES ÉLECTRONIQUES MHR

La manométrie électronique est une technique qui fait ses preuves depuis plus de 15 ans. Elle offre une réponse rapide qui permet de mesurer la véritable signature physiologique. Les sondes électroniques réutilisables ne nécessitent aucune préparation pour l'examen, aucun étalonnage, et un seul connecteur est utilisé pour toutes les pressions.

LABORIE offre une gamme complète de sondes électroniques pour :

- MHR et MHRI (œsophagienne)
- MHRA et MHRA à 360 degrés (anorectale)
- MHRC (côlon)
- MHRS (intestin grêle/antroduodénale)
- Sphincter d'Oddi

Disponibles en plusieurs diamètres, de 6CH à 14CH, afin de garantir une mesure de précision pour différents groupes de patients. Nos sondes sont pourvues de 1 canal de pression, pour de simples examens ARM, à 36 canaux de pression pour la MHR et 40 canaux de pression pour la MHRA à 360 degrés. Des électrodes à impédance et une lumière peuvent éventuellement être ajoutées.



QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS ET POUR VOS PATIENTS ?

CHOIX

De nombreux types de sondes, aussi bien des modèles standard que des sondes disponibles sur commande, vous sont offerts, et il y a donc une solution pour chacun de vos groupes de patients, chacun de vos types d'examens, et pour chaque budget. Si vous nous le demandez, nous pouvons même produire une sonde sur mesure selon vos propres spécifications, à des fins de recherche ou pour des examens très particuliers.

SIMPLICITÉ D'EMPLOI

Nos sondes électroniques ne nécessitent aucune préparation pour l'examen, aucun étalonnage, et un seul connecteur est

utilisé pour toutes les pressions. Grâce à leur capuchon spécial étanche à l'eau, les sondes peuvent être nettoyées par un procédé mécanique, plutôt qu'à la main. Cela vous laisse plus de temps pour vos patients.

FIABILITÉ

Grâce à leur haute qualité et à leur dérive minime, nos sondes se prêtent extrêmement bien à des examens prolongés, comme les examens de manométrie du côlon et de manométrie antroduodénale. Notre contrat de services Premium vous permet de réaliser vos examens sans interruptions, même quand des réparations s'avèrent nécessaires, et vous aide à tirer le maximum de votre sonde.



SONDES ÉLECTRONIQUES MHR STANDARD

Référence	Examen	Nbre press.	Types de canaux de pression	Diamètre	Impédance
K102459-00-1389-D	MHR	24	Tous unidirectionnels, P2 à 180 degrés	10CH	-
K103659-00-1102-D	MHR	36	5 circulaires (SIO), 31 unidirectionnels	10CH	-
K83659-E-10107-D	MHRI	36	Tous unidirectionnels	8CH	12Z (13 anneaux)
K103659-E-1545-D	MHRI	36	5 circulaires (SIO), 31 unidirectionnels	10CH	16Z (17 anneaux)
K12959-L5-1038-D	MHRA	9	1 pour ballonnet, 8 circonférentiels	12CH	-
K122359-L5-1623-D	MHRA (3D)	23	Tous unidirectionnels, 5 x 4 à 90 degrés	12CH	-

Sondes standard : livraison en moins de 2 semaines, les définitions des sondes sont systématiquement incluses dans le logiciel.

SONDES ÉLECTRONIQUES MHR DISPONIBLES SUR COMMANDE

Référence	Examen	Nbre press.	Types de canaux de pression	Diamètre	Impédance
K62559-00-1049-D	MHR	25	Tous unidirectionnels	6CH	-
K123659-00-1002-D	MHR	36	Tous circonférentiels	12CH	-
K62559-E-1022-D	MHRI	25	Tous unidirectionnels	6CH	12Z (13 anneaux)
K121259-L5-1444-D	MHRA	12	1 pour ballonnet, 11 circonférentiels	12CH	-
K143659-L6-1612-D	MHR AD	36	Tous unidirectionnels	14CH	-
K103659-00-1744-D	MHR AD	36	Tous unidirectionnels	10CH	-
K143659-L6-1375-D	MHR côlon	36	Tous unidirectionnels	14CH	-
K143659-L6-1352-D	MHR côlon	36	Tous unidirectionnels	14CH	-

Sondes disponibles sur commande : livraison en 6-8 semaines ; les définitions des sondes sont systématiquement incluses dans le logiciel.
Des sondes personnalisées peuvent être produites sur demande.



SOLAR GI HRM

LE SYSTÈME DE MHR LE PLUS ÉVOLUÉ SUR LE MARCHÉ

Pour des résultats optimaux, nous conseillons d'utiliser nos sondes électroniques avec le système Solar GI HRM – le système de MHR le plus évolué sur le marché à l'heure actuelle. Vous pourrez alors :

- Réaliser des procédures plus rapides (10 minutes seulement), plus fiables et plus précises
- Produire des analyses de données de meilleure qualité, plus simples et plus rapides
- Diminuer les coûts de vos procédures

CONTRAT DE SERVICES PREMIUM POUR LES SONDES ÉLECTRONIQUES MHR⁽¹⁾

Notre contrat de services Premium pour les sondes électroniques MHR est facultatif et comprend :

- Une couverture et une garantie étendues
- Un équipement de prêt en 48-72 heures
- Des coûts de réparation réduits


Type de service	Garantie standard	Contrat de services Premium
Nombre de procédures	200	300
Contrôle de la sonde et réétalonnage	Non inclus	Inclus
Équipement de prêt	Non	48-72 heures
Réparations	Non inclus	Inclus
Nettoyage professionnel	Non inclus	Inclus
Domages accidentels	Non inclus	Réduction de 50 % du coût

Le contrat de services Premium vous permet de réaliser vos examens de motilité sans perturbations de votre travail pendant la durée des réparations. Vous bénéficiez simultanément d'un plus grand nombre d'utilisations sous garantie de votre sonde.

Le contrat de services Premium n'est disponible que pour les sondes STANDARD qui viennent d'être achetées.

⁽¹⁾ Il se peut que notre contrat de services Premium ne soit pas disponible dans certaines régions.

N'hésitez pas à contacter votre représentant commercial pour connaître la disponibilité locale.

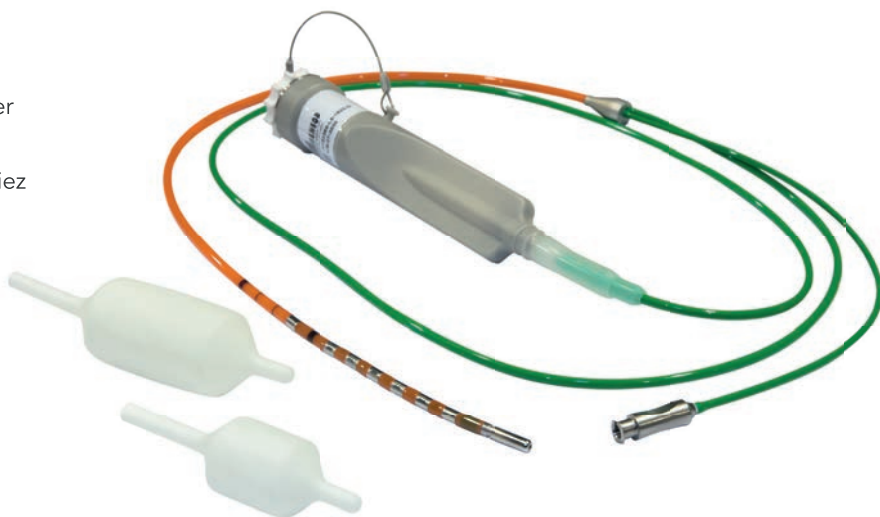

Ces données peuvent être sujettes à des modifications sans avis préalable 10-2018 © Copyright Laborie Pays-Bas 0077-BRG-016-FR-A4-V1.00 Sondes électroniques MHR PRC-023786

GI OFFICE :
Tel: +31 20 893 80 80
Email: GImarketing@laborie.com

De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
Pays-Bas

FRANCE :
Tél. : +33 1 79 75 03 03
Courriel : advfrance@laborie.com

www.laborie.com
www.mmsinternational.com