

# injeTAK®

CYSTOSCOPIENAALD VOOR PRECISIEWERK



*Innovation for Health*

# GEPATENTEERDE INSTELBARE NAALDDIEPTE VOOR NAUWKEURIGE, VEILIGE EN SNELLE INJECTIE

injeTAK®

## ONGEËVENAARDE PATIËNTVRIENDELIJKHEID EN VEILIGHEID

- Voor cystoscopische injecties in de blaaswand bij een overactieve blaas (OAB) en neurogene detrusor overactiviteit (NDO)
- Nauwkeurige, veilige toediening en een kortere behandel tijd

## OPTIMAAL INSTELBAAR

- De geheel inschuifbare naald beschermt de naaldpunt en de cystoscoop tijdens doorvoer
- Bij het inbrengen van de naald is geen extra beschermhuls nodig
- Afhankelijk van de blaaswanddikte kan de lengte van de naald worden ingesteld op 0, 2, 3, 4 en 5 mm
- Markeringen zorgen voor de optimale naaldlengte voor snelheid, veiligheid en consistentie (2 mm conform bijsluiters van de UR-geneesmiddelenfabrikant)
- Dankzij het ergonomische ontwerp is het instellen van de naald eenvoudig



## KENMERKEN NAALD

- 4.8 Fr is geschikt voor een klein werkkanal en voor de meeste pediatrische cystoscopen
- Door de zwarte indicator tip is de punt en de afstand tot het weefsel goed zichtbaar zodat de naald veilig op de juiste plek en diepte geplaatst kan worden
- De zeer scherpe 3-bevel punt is onder de optimale hoek geplaatst waardoor voor de punctie minimale kracht vereist is.
- Het unieke ontwerp van de canule maakt injecteren eenvoudig waarbij superieure flexibiliteit is gecombineerd met voldoende stevigheid

## BESCHIKBARE MATEN

35 cm – DIS199

70 cm – DIS201

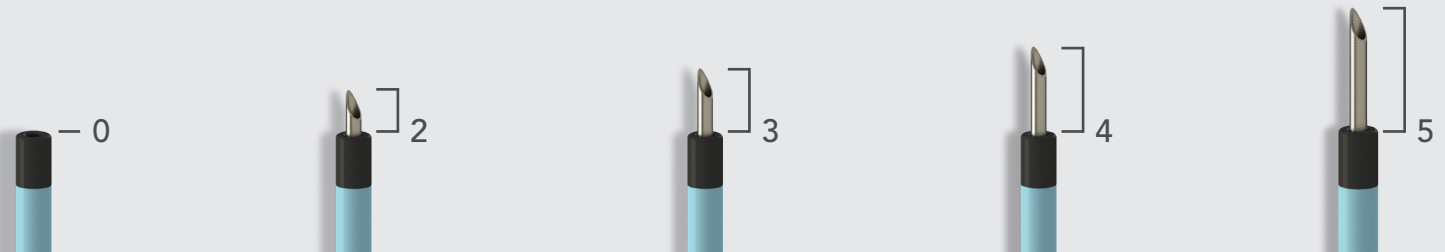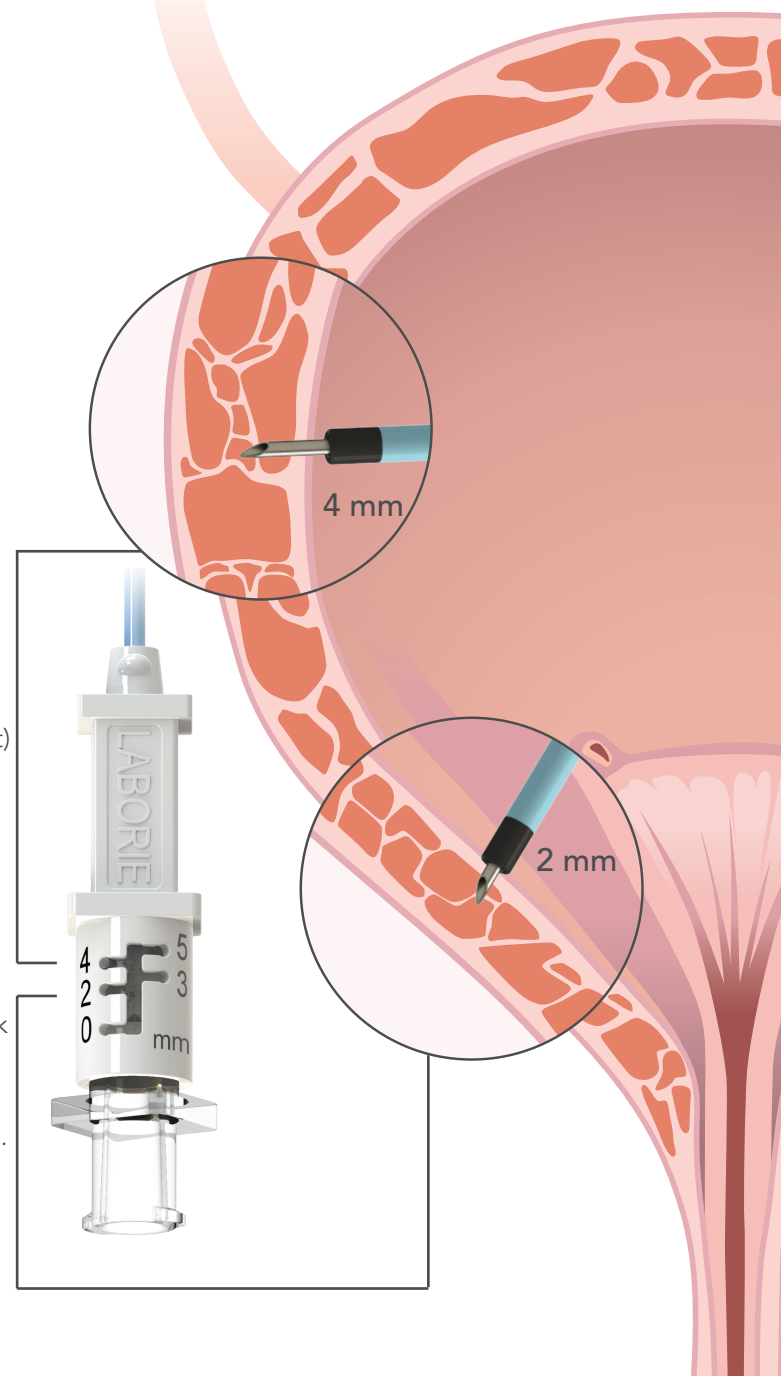

**USA:**  
Tel.: +1 802 857 1300  
800 522 6743  
Email: [usmarketing@laborie.com](mailto:usmarketing@laborie.com)

**EUROPE/INTERNATIONAL:**  
Tel.: +31 53 4803700  
Email: [info@laborie.com](mailto:info@laborie.com)

**HEADQUARTERS:**  
Tel.: +1 905 612 1170  
Email: [marketing@laborie.com](mailto:marketing@laborie.com)



ANNIVERSARY

[www.laborie.com](http://www.laborie.com)