

injeTAK®

AIGUILLE D'INJECTION SOUS CYSTOSCOPIE
PRECISION DU POSITIONNEMENT



Innovation for Health

PRECISION, SECURITE ET VITESSE GRACE A SON MARQUAGE DE PROFONDEUR BREVETE

injeTAK®

TRAITEMENT ET SECURITE DU PATIENT UNIQUE

- Destinée aux injections sous cystoscopie dans la paroi vésicale lors de l'hyperactivité vésicale (HAV) et de l'hyperactivité détrusorienne neurogène (HDN)
- Distribution précise et sûre du médicament, sur un temps de procédure réduit

REGLAGE OPTIMISE

- L'aiguille rétractable protège l'extrémité de l'aiguille et le cystoscope
- Elimine le recours à un introducteur
- L'extrémité de l'aiguille peut être réglée à 0, 2, 3, 4 et 5 mm afin de s'adapter à l'épaisseur de la paroi vésicale
- Les réglages permettent d'obtenir une longueur d'aiguille optimale répondant aux critères de vitesse, sécurité et reproductibilité
- Conçue dans un souci d'ergonomie, elle permet des réglages simples de l'extrémité



CARACTERISTIQUES DE L'AIGUILLE

- Grâce à sa taille de 4,8 Fr, elle peut être utilisée dans des canaux opérateurs plus petits et dans la plupart des endoscopes pédiatriques
- Le marqueur noir sur son extrémité indique la proximité visuelle des tissus, permettant ainsi un positionnement précis, une ponction sûre et une profondeur calibrée
- La précision de son angle ainsi que de son extrémité à trois biseaux ont été conçues afin de réduire la force nécessaire à la ponction
- Le dessin unique de la canule permet une injection simple et une flexibilité supérieure tout en conservant son intégrité structurelle

AVAILABLE SIZE OPTIONS

35 cm – DIS199

70 cm – DIS201

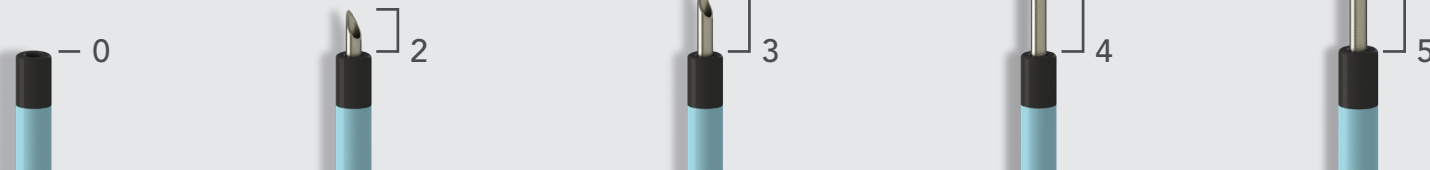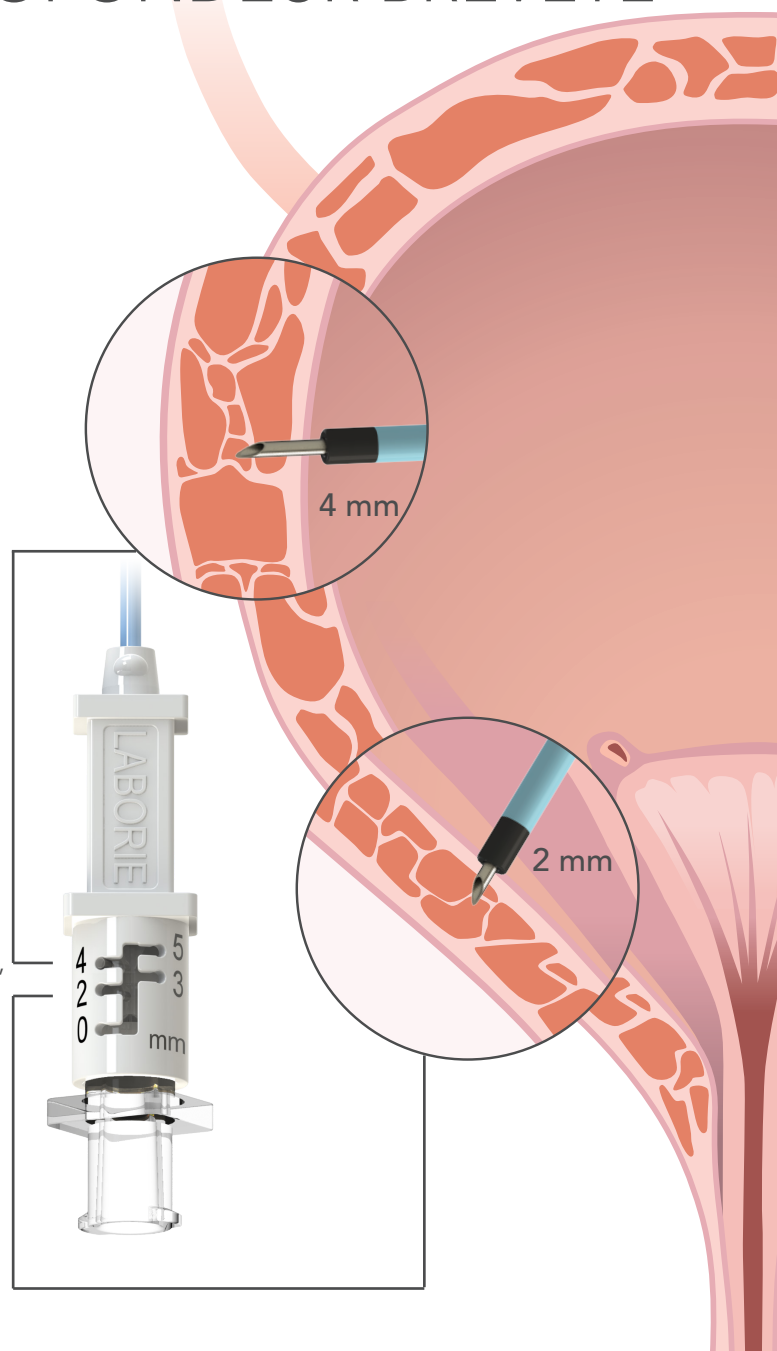

USA:
Tel.: +1 802 857 1300
800 522 6743
Email: usmarketing@laborie.com

EUROPE/INTERNATIONAL:
Tel.: +31 53 4803700
Email: info@laborie.com

HEADQUARTERS:
Tel.: +1 905 612 1170
Email: marketing@laborie.com



ANNIVERSARY

www.laborie.com