



UROCAP™ IV

INNOVATION EN URODYNAMIQUE



Innovation for Health

UROCAP IV

LE RAFFINEMENT EN MATIÈRE DE DÉBITMÈTRE URINAIRE

UROCAP IV est une solution LABORIE, fiable, autonome, économique et facile d'utilisation.

UROCAP IV améliore l'intimité du patient et offre une polyvalence fonctionnelle grâce à sa technologie sans fil et à sa batterie protégée contre l'eau : il suffit de le placer où on désire l'utiliser et il enverra des données sans fil à votre ordinateur.

Le logiciel UROCAP IV, combiné avec le logiciel i-LIST Reporter est facile d'utilisation et permet de consulter et générer une variété de rapports et de données en quelques clics de souris. En un clic, les rapports peuvent être imprimés, envoyés au format MS Word, PDF ou automatiquement par courrier électronique aux médecins traitants. Notre technologie d'avant-garde, vous permet de simplifier votre flux de travail et d'accroître votre patientèle sans créer de stress pour vos équipes ni compromettre la qualité des soins.

En tant que solution de débitmétrie urinaire, UROCAP IV de LABORIE est conçu pour répondre à vos besoins.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions et Poids	L = 6.3" (16.0cm) l = 6.3" (16.0cm) H = 2.6" (6.6cm) Poids = 0.7lbs (0.3kg)	
Canaux de Mesure	Volume: Variation : 0 to 1200ml Précision = +/- 2% Vitesse d'échantillonnage = 20Hz	Flux : Variation : 0 to 50mL/s Précision = +/- 5% Vitesse d'échantillonnage = 20Hz
Voyants lumineux :	Bluetooth, statut et pile	
Chargeur	5 VDC, 3.0A	


ACCESSOIRES FACULTATIFS



Chaise



Support de débit urinaire

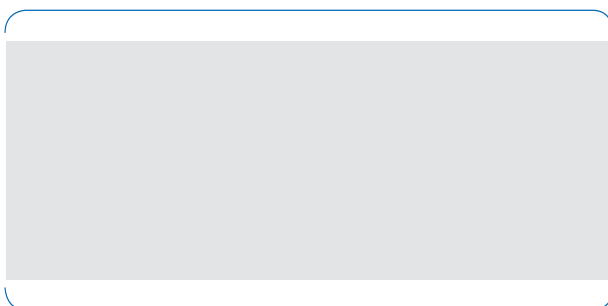

É.U.:
Tel.: 800 522 6743
Email: usmarketing@laborie.com

EUROPE/INTERNATIONAL:
Tel.: +31 53 4803700
Email: info@laborie.com

SIÈGE SOCIAL:
Tel.: +1 905 612 1170
Email: marketing@laborie.com



www.laborie.com